



WIRTUALNI TERAPEUCI

AKADEMIA MASAŻU I KOSMETOLOGII KOMPLEMENTARNEJ

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA ONLINE

Moduł I Lekcja 5

OPRACOWAŁA - MAGDALENA KAMIŃSKA, MARTA JAŁOWIECKA

LEKCJA 5

URZĄDZENIE - MEZOPEN

Urządzenie do mezoterapii mikroigłowej zaczynają się od cen, na które na pewno każdy salon może sobie pozwolić, tym samym, będzie Was stać, żeby ten zabieg wprowadzić do swojej oferty,

Dzisiejsze szkolenie przeprowadzimy na urządzeniu marki Dr PEN M7. Mezopen ma wejście na ładowarkę, a na drugim końcu na kartridże, na samym środku urządzenia znajdują się pokrętło, które pozwala na zmianę długości wysuwu igieł. Dodatkowo znajdują się opis tej skali i igły można wysunąć odpowiednio od 0 do 2,5 mm.

Na twarzy pracujemy maksymalnie do 1,75 milimetra.

Przed włączeniem urządzenia wkładamy odpowiedni kartridż. Prezentowany przez nas mezopen po naładowaniu, można odłączyć kabel zasilający i działa on bezprzewodowo co na pewno będzie o wiele wygodniejsze przy wykonywaniu zabiegu. Ważne, aby mezopen był zamortyzowany - tzn. nie drgał, ponieważ przy tym zabiegu ważne jest, aby igły precyzyjnie pracowały. Ważne, aby urządzenie nie było ciężkie, ponieważ jest to długi zabieg, a nasza ręka nie może być przemęczona. Są to bardzo ważne aspekty, by zabieg był bezpieczny i precyzyjnie wykonany, aby uniknąć niepożądanego uszkodzenia tkanki np. przy szarpnięciu.

LEKCJA 5

URZĄDZENIE - MEZOPEN

Poniżej przedstawiam Wam przegląd urządzeń do mezoterapii mikroigłowej. Kiedyś mezoterapia była wykonywana tylko przy pomocy rollerów, następnie weszły mezopeny.

Kolejnym etapem były urządzenia o nowoczesnym designie.

Designie piękny i nowoczesny, ale sposób działania ten sam.





WIRTUALNI TERAPEUCI
AKADEMIA MASAŻU I KOSMETOLOGII KOMPLEMENTARNEJ

LEKCJA 5

URZĄDZENIE - MEZOPEN



Kamila.net.pl





[illegible]

LEKCJA 5

RODZAJE KARTRIDŻY

Kartridże są jednorazowego użytku, wyróżniamy 9, 12, 24, 36 i 42 igłowe. Możemy podzielić je na dwie grupy, ze względu na sposób rozmieszczenia igieł.

Pierwsza grupa - kartridże 9 i 12 igłowe, tutaj igły są rozmieszczone w równej odległości od siebie, te rodzaje są dedykowane większym problemom skóry np. zmarszczki czy blizny. Wymagana jest tutaj nasza precyzyjna praca.

Druga grupa 24, 36 i 42 igłowe, stosujemy na delikatniejszą pracę, wyróżnia je ułożenie igieł w sposób szeregowy.

Im większa ilość igieł, tym działanie jest delikatniejsze, Dlatego przy pierwszym zabiegu zaleca się użycie kartridżu z 36 lub 42 igłami.

Jest jeszcze kartridż NANO - który nie posiada żadnych igieł, mamy płaską płytkę z lekkimi wypustkami i jest on stosowany przy zabiegu BB GLOW, po to aby wtłoczyć produkt głębiej niż przy sposobie manualnym, nie przerywając ciągłości skóry. Natomiast nie stosujemy takiej końcówki do zabiegu MEZOTERAPII MIKROIGŁOWEJ.




WIRTUALNI TERAPEUCI

AKADEMIA MASAŻU I KOSMETOLOGII KOMPLEMENTARNEJ

LEKCJA 5

RODZAJE KARTRIDŻY


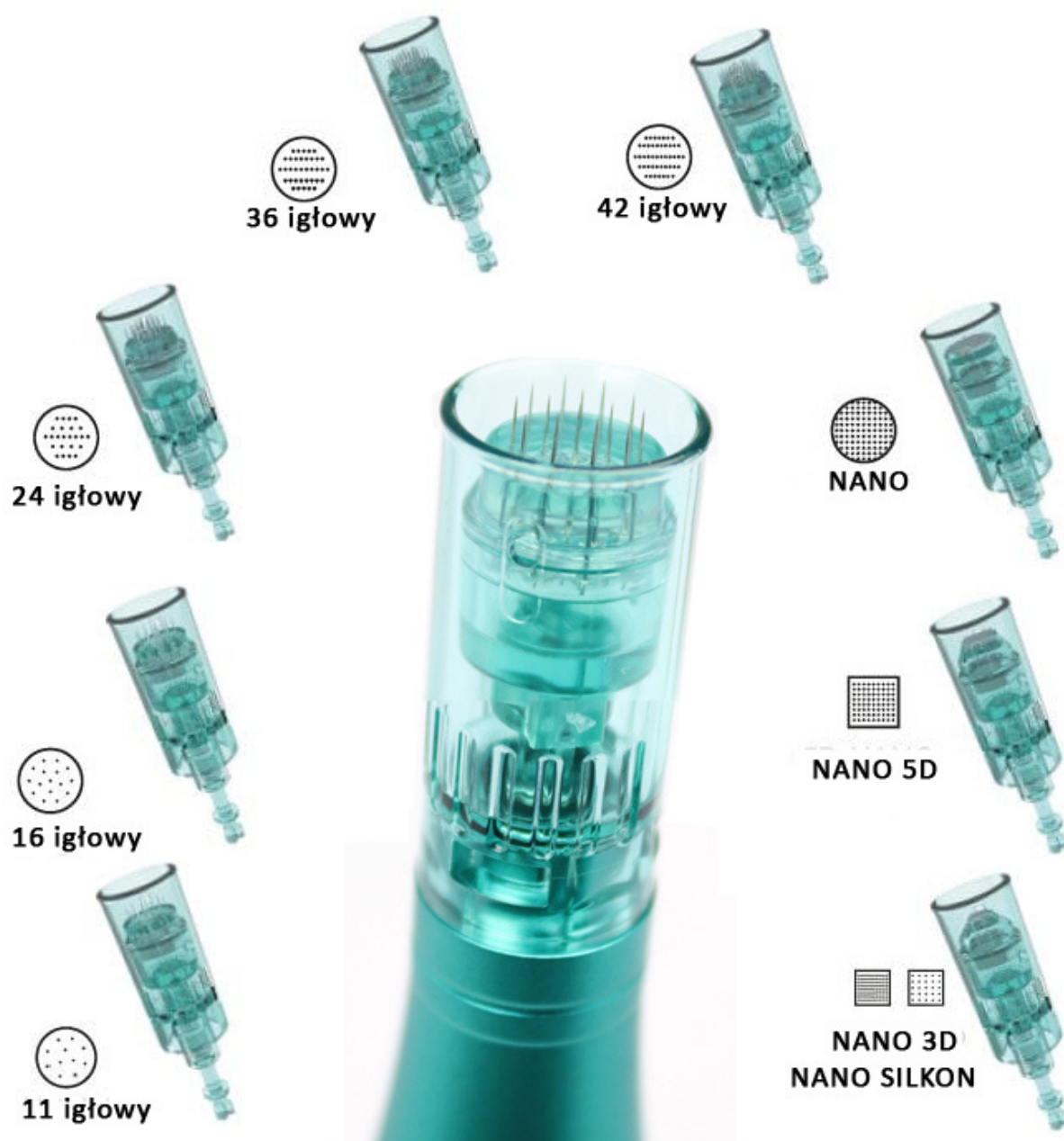




WIRTUALNI TERAPEUCI
AKADEMIA MASAŻU I KOSMETOLOGII KOMPLEMENTARNEJ

LEKCJA 5

RODZAJE KARTRIDŻY

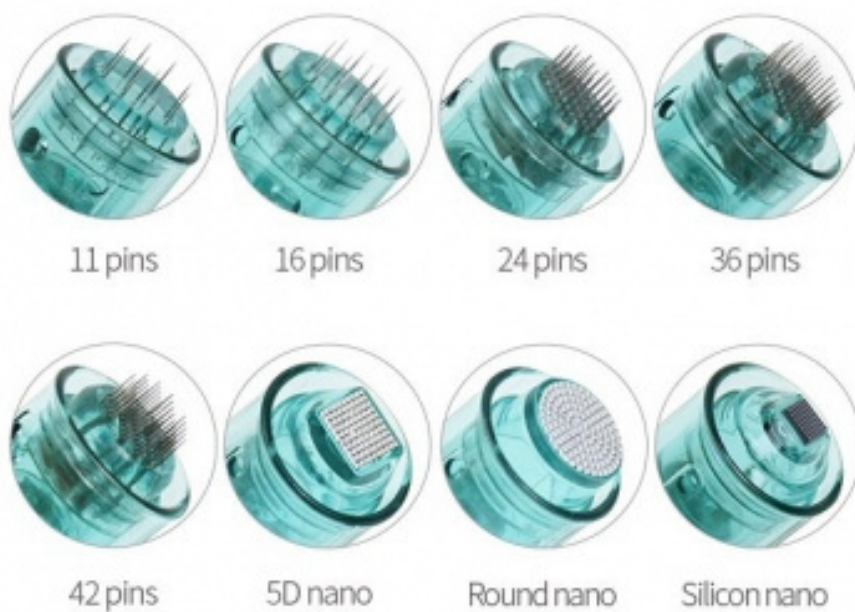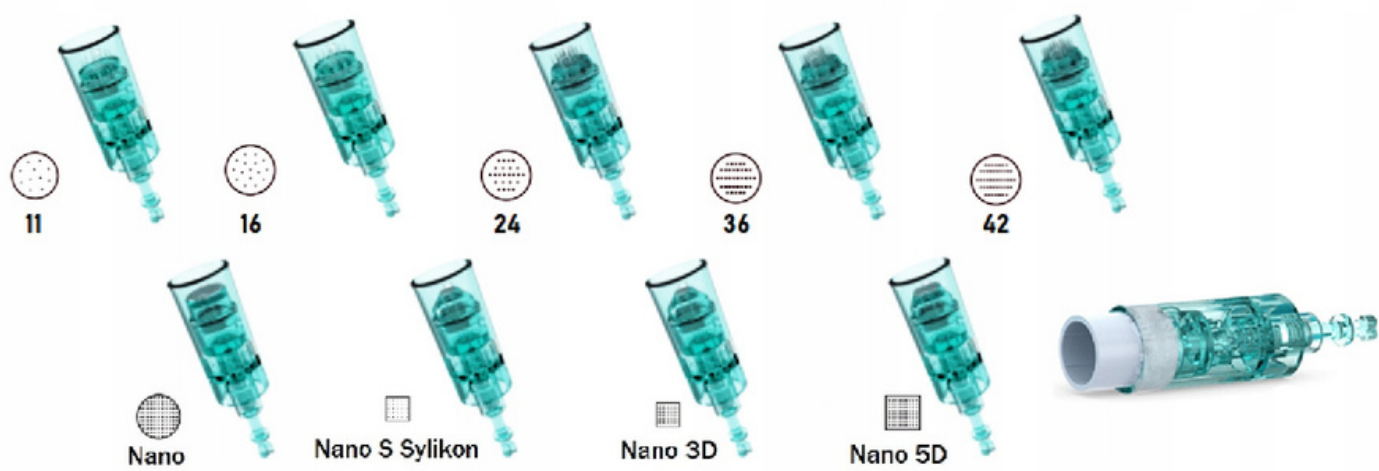

LEKCJA 5

RODZAJE KARTRIDŻY

Kartridż Mezoterapia Mikroigłowa (MTS)

